

REAL CARE ΔΟΧΕΙΟ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

Αποστειρωμένο δοχείο συλλογής και μεταφοράς κοπράνων για ανάλυση και καλλιέργεια.








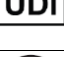





Κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο, με βιδωτό καπάκι για ασφάλεια στη μεταφορά. Χωρητικότητα 60ml. Περιλαμβάνει κουταλάκι για τη συλλογή του δείγματος.

Οδηγίες χρήσης: Αφαιρέστε το δοχείο από την συσκευασία αποστείρωσης. Ξεβιδώστε το πώμα. Με την ειδική σπάτουλα, συλλέξτε το δείγμα κοπράνων εντός του δοχείου και ασφαλίστε ξανά με το πώμα. Συμβουλευτείτε τον επαγγελματία υγείας για τον σωστό τρόπο λήψης του δείγματος.

Προειδοποιήσεις:

- Μην χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία αποστείρωσης είναι ανοικτή ή αν ο περιέκτης είναι ανοικτός ή έχει υποστεί φθορά.
- Σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών, αναφέρετε στον Κατασκευαστή και την Αρμόδια Αρχή.

Επεξήγηση συμβόλων

	Κατασκευαστής		Ημερομηνία κατασκευής
	Κωδικός παρτίδας		Ιατροτεχνολογικό προϊόν in vitro
	Κρατήστε μακριά από το ηλιακό φως		Διατηρήστε στεγνό
	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης		Μοναδικό αναγνωριστικό τεχνολογικού προϊόντος
	Αποστειρωμένο με αιθυλενοξειδίο		Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά και συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
	Ημερομηνία λήξης		Μην επαναχρησιμοποιείτε
	Σύμβολο CE		



ΠΡΟΜΗΦΑΡ ΑΕ
Μεγ.Αλεξάνδρου 28, Αχαρναί, 13671
Τ: +30 210 2771398, F +30 210 2409134
E-mail: info@promifarm.gr

**Αποκλειστική
διανομή και
εμπορία:**

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Α.Ε.
Εθνικής Αντιστάσεως 3-5, Γέρακας, Αττική
Τ: +30 210 9645223
E-mail: info@pansyfa.com ,
<https://pansyfa.coop>

REAL CARE CONTAINER FOR THE COLLECTION AND TRANSPORTATION OF STOOL

Sterilized container for the collection and transportation of stool, for analysis and stool culture.














Made from polypropylene, with screw lid for safe transport. Capacity 60ml. Includes spatula for sample collection.

Instructions for use: Remove the container from the sterilized packaging. Unscrew the lid. Using the included spatula, collect the stool sample inside the container. Close securely with the lid. Consult your healthcare provider for the appropriate method of sample collection.

Cautions:

- Do not use if the sterilized packaging is open or if the container lid is open or if the container is damaged.
- In case of any serious adverse event, please report to the Manufacturer and the Competent Authorities.

Symbol Descriptions

	Manufacturer		Date of manufacture
	Batch code		In vitro diagnostic medical device
	Keep away from sunlight		Keep dry
	Consult instructions for use		Unique device identifier
	Sterilized using ethylene oxide		Do not use if package is damaged and consult instructions for use
	Use-by date		Do not re-use
	CE mark		



PROMIFAR
28 Meg. Alexandrou str., Acharne,
13671
T: +30 210 2771398, F +30 210 2409134
E-mail: info@promifar.gr

**Exclusively
distributed
and traded
by:**

PANSYFA A.E.
3-5 Ethnikis Antistaseos Str, 15344,
Gerakas, Attica, Greece
T: +30 210 9645223
E-mail: info@pansyfa.com ,
<https://pansyfa.coop>