

REAL CARE ΑΝΔΡΙΚΟ ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ 24ΩΡΟΥ REAL CARE




Δοχείο για τη συλλογή και μεταφορά ούρων 24ώρου. Κατασκευασμένο από μη τοξικό, υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο. Χωρητικότητας 2,5 λίτρων. Με δύο βιδωτά πώματα από πολυπροπυλένιο, το ένα με μεγάλο άνοιγμα για τη συλλογή του δείγματος ούρων και το δεύτερο για τη λήψη του δείγματος ούρων. Εργονομικός σχεδιασμός με λαβή μεταφοράς για ευκολία στη χρήση.

Οδηγίες χρήσης: Αφαιρέστε το ουροδοχείο από την συσκευασία. Ξεβιδώστε το μεγαλύτερο πώμα. Συλλέξτε τα ούρα εντός του δοχείου, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον επαγγελματία υγείας. Μετά από κάθε χρήση, ασφαλίστε με το καπάκι.

Προειδοποιήσεις:

- Μην χρησιμοποιείτε αν ο περιέκτης είναι ανοικτός ή έχει υποστεί φθορά, ή αν τα πώματα δεν εφαρμόζουν σωστά.
- Σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών, αναφέρετε στον Κατασκευαστή και την Αρμόδια Αρχή.

Επεξήγηση συμβόλων

	Κατασκευαστής		Ημερομηνία κατασκευής
	Κωδικός παρτίδας		Ιατροτεχνολογικό προϊόν in vitro
	Κρατήστε μακριά από το ηλιακό φως		Διατηρήστε στεγνό
	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης		Μοναδικό αναγνωριστικό τεχνολογικού προϊόντος
	Πολλαπλή χρήση από ένα μόνο άτομο		Ανακύκλωση (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο)
	Σύμβολο CE		Ανακύκλωση (πολυπροπυλένιο)



ΠΡΟΜΗΦΑΡ ΑΕ
Μεγ.Αλεξάνδρου 28, Αχαρναί, 13671
Τ: +30 210 2771398, F +30 210 2409134
E-mail: info@promifar.gr

**Αποκλειστική
διανομή και
εμπορία:**

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Α.Ε.
Εθνικής Αντιστάσεως 3-5, Γέρακας, Αττική
Τ: +30 210 9645223
E-mail: info@pansyfa.com ,
<https://pansyfa.coop>

REAL CARE CONTAINER FOR 24HOUR-COLLECTION OF URINE AND TRANSPORTATION








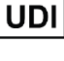




Container for 24hour-collection of urine and transportation. Made from non-toxic, high-density polyethylene. Capacity of 2.5 litres. With two screw lids made of polypropylene - one with a wide opening for urine sample collection and a smaller one for taking the urine sample. Ergonomic design with carrying handle for ease of use.

Instructions for use: Remove the container from the packaging. Unscrew the largest lid. Collect the urine sample inside the container, according to the instructions given by the healthcare professional. After each use, close securely with the lid.

Cautions:

- Do not use if the container lids are open, or do not fit well or if the container is damaged.
- In case of any serious adverse event, please report to the Manufacturer and the Competent Authorities.

Symbol Descriptions

	Manufacturer		Date of manufacture
	Batch code		In vitro diagnostic medical device
	Keep away from sunlight		Keep dry
	Consult instructions for use		Unique device identifier
	Single patient multiple use		Recycling (High Density Polyethylene)
	CE mark		Recycling (Polypropylene)



PROMIFAR
28 Meg.Alexandrou str., Acharne,
13671
T: +30 210 2771398, F +30 210 2409134
E-mail: info@promifar.gr

**Exclusively
distributed
and traded
by:**

PANSYFA A.E.
3-5 Ethnikis Antistaseos Str, 15344,
Gerakas, Attica, Greece
T: +30 210 9645223
E-mail: info@pansyfa.com ,
<https://pansyfa.coop>