

## REAL CARE ΑΝΔΡΙΚΟ ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ 800ml

**Ανδρικό ουροδοχείο 800ml πολλαπλών χρήσεων** για τη συλλογή ούρων. Με βιδωτό πώμα ασφαλείας. Κατασκευασμένο από μη τοξικό, ανθεκτικό, υψηλής αντοχής πολυπροπυλένιο. Με λείες, στρογγυλές επιφάνειες για αποφυγή τραυματισμών. Με μεγάλο άνοιγμα στο άνω μέρος για να δέχεται το δείγμα (ούρα).

**Οδηγίες χρήσης:** Αφαιρέστε το ουροδοχείο από την πλαστική συσκευασία. Ξεβιδώστε το καπάκι. Συλλέξτε τα ούρα εντός του δοχείου και ασφαλίστε ξανά με το καπάκι. Για να επαναχρησιμοποιήσετε το ουροδοχείο, ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού.

### Οδηγίες καθαρισμού:






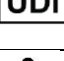

- Χρησιμοποιήστε τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (πχ. γάντια μιας χρήσης) για τον περιορισμό πιθανής μεταφοράς μικροβίων.
- Αδειάστε το περιεχόμενο του ουροδοχείου στην τουαλέτα ή το σύστημα αποχέτευσης.
- Ξεπλύνετε το ουροδοχείο με ζεστό νερό, απομακρύνοντας κατάλοιπα ούρων.
- Εφαρμόστε ήπιο απολυμαντικό καθαριστικό προϊόν σε όλες τις επιφάνειες του ουροδοχείου, (εσωτερικές και εξωτερικές) και καθαρίστε με μαλακή βούρτσα ή ένα σφουγγάρι.
- Ξεπλύνετε καλά με ζεστό νερό και βεβαιωθείτε ότι το ουροδοχείο είναι καθαρό.
- Αφήστε το ουροδοχείο να στεγνώσει πλήρως με φυσικό τρόπο ή στεγνώστε καλά χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί μιας χρήσης.
- Απορρίψτε τα μέσα ατομικής προστασίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
- Πλύνετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και ζεστό νερό, στεγνώνοντας με μια χαρτοπετσέτα και απορρίψτε σε κλειστό κάδο απορριμμάτων.

**Οδηγίες αποθήκευσης:** Όταν δεν χρησιμοποιείται, το προϊόν συνιστάται να αποθηκεύεται καθαρό, σε περιβάλλον δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο και μακριά από την έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως, θερμότητα, φλόγες, πηγές ανάφλεξης και οξειδωτικούς παράγοντες.

### Προειδοποιήσεις:

- Αντικαταστήστε το προϊόν σε περίπτωση που έχει γρατζουνιστεί/ λεκιαστεί, έχει άλλα ορατά σημεία φθοράς ή το καπάκι δεν εφαρμόζει καλά.
- Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.
- Σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών, αναφέρετε στον Κατασκευαστή και την Αρμόδια Αρχή.

### Επεξήγηση συμβόλων

	Κατασκευαστής		Ημερομηνία κατασκευής
	Κωδικός παρτίδας		Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Κρατήστε μακριά από το ηλιακό φως		Διατηρήστε στεγνό
	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης		Μοναδικό αναγνωριστικό τεχνολογικού προϊόντος
	Σύμβολο CE		Ανακύκλωση (πολυπροπυλένιο)



ΠΡΟΜΗΦΑΡ ΑΕ  
Μεγ.Αλεξάνδρου 28, Αχαρναί, 13671  
Τ: +30 210 2771398, F +30 210 2409134  
E-mail: info@promifar.gr

**Αποκλειστική  
διανομή και  
εμπορία:**

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Α.Ε.  
Εθνικής Αντιστάσεως 3-5, Γέρακας, Αττική  
Τ: +30 210 9645223  
E-mail: info@pansyfa.com ,  
<https://pansyfa.coop>

## REAL CARE MEN'S URINE BOTTLE 800ml

**Multiple use men's urine bottle for urine collection.** With safety screw lid. Made of non-toxic, durable, high strength polypropylene. With smooth, round surfaces to prevent injury. With a large opening at the top to receive the sample (urine).

**Instructions for use:** Remove the urine bottle from the plastic packaging. Unscrew the lid. Collect the urine inside the container and secure again with the lid. To reuse the urine container, follow the cleaning instructions.

### Cleaning instructions:











- Use the necessary personal protective equipment (e.g., disposable gloves) to limit possible microbial transfer.
- Empty the contents of the urine bottle into the toilet or drainage system.
- Rinse the urine bottle with warm water, removing any urine residue.
- Apply a mild disinfecting cleaning agent to all surfaces of the urine bottle (internal and external), and clean with a soft brush or sponge.
- Rinse thoroughly with warm water and make sure the urine bottle is clean.
- Allow the urine bottle to air-dry completely or dry thoroughly using a soft, disposable cloth.
- Dispose of personal protective equipment in accordance with national legislation.
- Wash your hands thoroughly with soap and warm water, dry them with a paper towel and dispose of them in a closed bin.

**Storage instructions:** When not in use, the product is recommended to be stored clean, in a cool, dry, well-ventilated environment and away from exposure to direct sunlight, heat, flames, ignition sources and oxidizing agents.

### Warnings:

- Replace the product if it is scratched/stained or has other visible signs of wear or the lid is ill-fitting.
- Discard the product in accordance with local and national regulations.
- In case of serious incidents, report to the Manufacturer and the Competent Authority.

### Symbol Descriptions

	Manufacturer		Date of manufacture
	Batch code		Medical Device
	Keep away from sunlight		Keep dry
	Consult instructions for use		Unique device identifier
	CE mark		Recycling (polypropylene)



PROMIFAR  
28 Meg.Alexandrou str., Acharne,  
13671  
T: +30 210 2771398, F +30 210 2409134  
E-mail: info@promifar.gr

**Exclusively  
distributed  
and traded  
by:**

PANSYFA A.E.  
3-5 Ethnikis Antistaseos Str, 15344,  
Gerakas, Attica, Greece  
T: +30 210 9645223  
E-mail: info@pansyfa.com ,  
<https://pansyfa.coop>